

VelaShape II™

Systemspezifikationen

	Vsmooth Applikator	VcontourApplikator
RF-Energie	Bis zu 60W	
Infrarotenergie	Bis zu 35W	
Lichtspektrum	700–2000nm	
Vakuum	Gepulst	
Behandlungsareal	40mm x 40mm	30mm x 30mm
Gewicht	27kg	
Abmessungen	36 x 55 x 80 cm	
Anschluß	230 V	
Qualitätsstandards	CE, FDA	

Hersteller: Syneron Medical Ltd.

VelaShape – für eine effektive
Behandlung zahlreicher Körperzonen



Orcos Medical AG
Untere Heslibachstrasse 41a
CH-8700 Küsnacht
Tel.: +41 (0) 44 400 92 92
Fax: +41 (0) 44 400 92 91
E-Mail: info@orcoss.ch
www.orcos.ch

VelaShape II™

Umfangreduzierung
Cellulitebehandlung



VelaShape II™

Bemerkenswerte Behandlungsergebnisse

- Die erste Plattform zur Umfangreduzierung, die von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen wurde
- Erste Plattform der Kategorie II für Cellulitereduierung, die von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen wurde
- 4 Behandlungsprotokolle für sichtbare Ergebnisse
- Urheberrechtlich geschützte elös-Technologie für optimale Ergebnisse
- Behandlung von Bauch, Po oder Oberschenkeln in weniger als 30 Minuten
- Stimuliert die Fettspeicherung in den Fettspeicherungszellen schnell und gezielt
- Die echte Alternative zur chirurgischen Fettabsaugung

Die aussergewöhnliche Wissenschaft von VelaShape



Vor der VelaShape Behandlung.

VelaShape basiert auf der revolutionären elös-Technologie, einer Kombination aus bipolarer Radiofrequenz (RF), Infrarotstrahlung sowie Unterdruck und mechanischer Gewebestimulation.



Infrarotlicht erwärmt das Gewebe bis zu 5mm tief. RF erwärmt das Gewebe von 5-15mm Tiefe.

Die Synergie aus Infrarot- und gesteuerter RF-Strahlung steigert die intrazelluläre Sauerstoffdiffusion durch Erwärmen der Haut.



Nach der Behandlung: Verkleinerung der Fettzellen und Fettkammern.

Vakuum und speziell geformte Rollen stimulieren und glätten die Haut, um einen sicheren und effizienten Energiefluss zu ermöglichen.

Somit ergibt sich letztlich ein erhöhter Fettstoffwechsel (Lipolyse), ein verbesserter Lymphfluss und eine Größenreduzierung oder Schrumpfung vorhandener Fettkammern.

Das Ergebnis: Eine Reduzierung des Umfangs im behandelten Bereich sowie ein glatteres Erscheinungsbild der Haut.




Vsmooth™




Vcontour™




Behandlungen am Körper

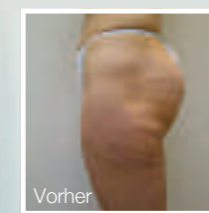


Vorher

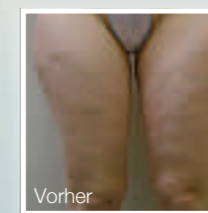


Vorher

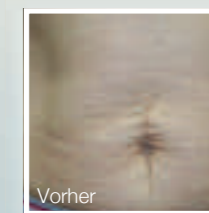


Vorher

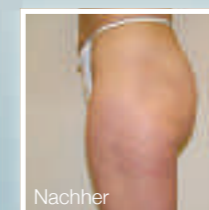

Nachher

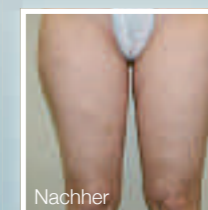

Nachher

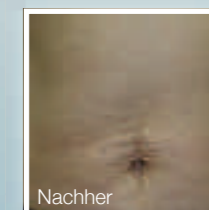

Nachher

Wissenschaftlich fundierte Ergebnisse

Die Sicherheit und Wirksamkeit der Technologie des VelaShape-Systems wurden sowohl in klinischen Versuchen mehrerer Forschungszentren als auch durch mehr als eine Million Behandlungen von Patienten auf der ganzen Welt bestätigt.

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie* belegen:

- Eine durchschnittliche Umfangreduzierung von fast zwei Zentimetern am Oberschenkel.
- Die meisten Patienten empfanden die Behandlung nicht als unangenehm und hatten auch danach keine Beschwerden.

*Studie zur Umfangreduzierung, durchgeführt von Tess Mauricio, M.D. sowie Gerry Boey, M.D.

«Das VelaShape ist der einzige von der FDA bestätigte Fettreduzierer. VelaShape ist eine Alternative zur Liposuktion, die auch wirklich funktioniert.»